



MAXIMIZAMOS LA PRODUCTIVIDAD EN
LABORATORIOS COMO EL SUYO



ARCHITECT *i*1000SR

- Resultados equivalentes en todos los ARCHITECT iSystems
- Facilidad en el manejo de las muestras
- Rápida prioridad a las muestras STAT

Consulte las precauciones, limitaciones y riesgos operacionales en el Manual de Operaciones. Puede encontrar los manuales en www.abbottdiagnostics.com.

Put science on your side.

 **Abbott**
A Promise for Life

TECNOLOGÍA AVANZADA Y PATENTADA MAYOR SEGURIDAD PARA EL PACIENTE



Portador de reactivos
ARCHITECT i1000SR

Verdaderas Características Comunes de Familia

- ARCHITECT i1000SR ejemplifica la filosofía de diseño de la familia de analizadores ARCHITECT
- Tecnología CHEMIFLEX, reactivos en kits de 100 pruebas, protocolos de ensayos y consumibles idénticos
- Software ARCHITECT idéntico
- Gradilla universal de muestras ARCHITECT idéntica

Beneficios: Resultados equivalentes del paciente en todos los instrumentos de inmunoensayo ARCHITECT, y para el usuario, una experiencia sencilla y uniforme

Sistema y Dinámica de Ensayos Mejorados

- La tecnología CHEMIFLEX con protocolos flexibles de ensayo proporciona excelente sensibilidad en el extremo inferior y rangos dinámicos ampliados
- El nuevo diseño patentado de la cubeta de lavado y el algoritmo de lavado controlan eficazmente el arrastre entre muestras (<0.1 ppm de tubo a tubo)
- La tecnología de diferencial de presión permite la detección de coágulos, burbujas y volumen insuficiente de la muestra para reducir los errores analíticos y mejorar la seguridad del paciente

Beneficios: Certeza y confianza en los resultados clínicos

Integración sin Compromiso

- Diseñado para integrarse con el analizador químico c4000 →ci4100
- Pruebas STAT rápidas: El Manipulador Robotizado de Muestras (RSH) proporciona acceso continuo durante el proceso, lo que permite la carga de reactivos y muestras todo el tiempo, de manera que el laboratorio prioriza las pruebas a través de las bahías de prioridad configurables

Beneficios: Procesa primero las muestras más urgentes sin comprometer las muestras de rutina


ARCHITECT

i1000SR



Acceso a cargar reactivos y muestras durante el proceso

ARCHITECT c4000 se puede integrar con ARCHITECT i1000SR para consolidar la química clínica y los inmunoensayos en una sola plataforma

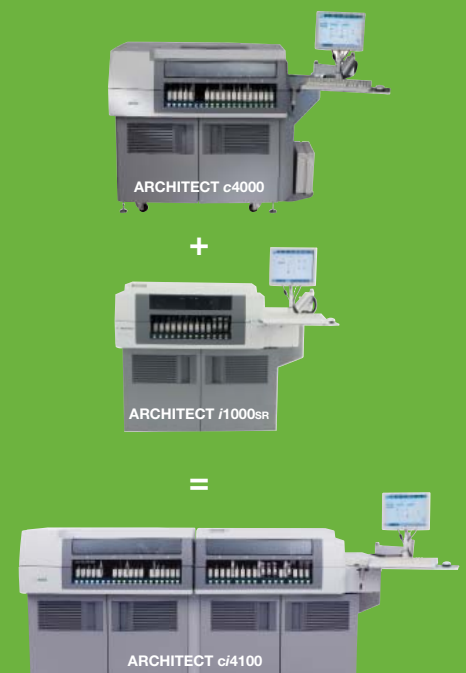

ARCHITECT, i1000SR, c4000, c4100, CHEMIFLEX y *Put science on your side.* son marcas comerciales de Abbott Laboratories en varias jurisdicciones

www.abbottdiagnostics.com
1-877-4ABBOTT

© 2010 Abbott Laboratories AR_09_39884UK/v1/AE2186-7.5 Feb Printed in USA

 **Abbott**
Diagnostics